

APESIN spray



Alkoholisches Flächendesinfektions-Pumpspray

- Schnell wirksam
- Ohne Farbstoff
- Zertifiziert

Produktprofil

- APESIN spray ist empfohlen zur Desinfektion von Geräten, Mobiliar und Flächen im Klinik- und Objektbereich.
- Mit APESIN SPRAY können z.B. Matratzen, Bettgestelle, Transportwagen, Instrumentenablage, Badmatten und -roste, Abfalleimer, Toilettensitze, Armaturen, Türgriffe, Möbel- und Arbeitsflächen, Geländer, Schuhe sowie alle schwer zugänglichen Stellen desinfiziert werden.
- APESIN spray ist geprüft und begutachtet nach den Richtlinien der VAH-Liste.
- Frei von Chlor, Aldehyden und Phenol.

Anwendungsbereich

- Nicht auf alkoholempfindlichen Oberflächen anwenden (z.B. Plexiglas).
- N-14166, N-14167

Anwendung und Dosierung



Bitte Hinweise beachten.



konzentriert.

Desinfektionsmittel: geeignet für Bereiche mit besonderen Hygieneanforderungen.




konzentriert.

Toilettenreinigung: Toilettensitz reinigen.



konzentriert.

Sprühflasche: reinigungslösung aus kurzer Distanz auf Tuch aufspritzen und Flächen abwischen.

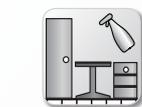

Max. 50 mL/m². Keine größeren Flächen einsprühen (max. 2m²).

Inhaltsstoffangabe:

Zusammensetzung pro 100g: 70g ISOPROPYL ALCOHOL, 0,1g LAURYLAMINE DIPROPYLENEDIAMINE, Duftstoffe

	Einwirkzeiten			
	30 Sek.	1 Min.	5 Min.	15 Min.
DGHM-VAH, geringe org. Belastung mit Mechanik			konz.	
DGHM-VAH, hohe org. Belastung mit Mechanik			konz.	
Schnelldesinfektion*		konz.		
TBC DGHM-VAH, geringe/ hohe org. Belastung mit Mechanik			konz.	
TBC** Schnelldesinfektion		konz.		
Begrenzt viruzid: DW, HBV, HIV, HCV sowie animalische, humane Influenza A/ Viren, z. B. H1N1, H3N8	konz.			
Rotavirus	konz.			
Norovirus				konz.

* Schnelldesinfektion nach Methode DGHM/VAH geringe/ hohe org. Belastung
 ** TBC-Schnelldesinfektion nach Methode DGHM/VAH geringe/ hohe org. Belastung
 Begrenzt viruzid: Wirksam gegen alle behüllte Viren
 Geprüft nach den europäischen Normen EN 1040, 1275, 1276, 1650, 13697

Nachhaltigkeit und Produktion:



Produktsicherheit, Lagerung und Umweltschutz

Sicherheit: Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Ausführliche Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Lagerung: Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern.

Umweltschutz: Behälter nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Verkaufseinheit

Bestell-Nr.: 713189 10 x 750 mL

Ihr Partner:

pH-Wert:

